

Remiss för droganalyser i Urin

Kundnr: _____ Organisation/företag: _____ Provdatum: _____

Adress: _____

Streck-kod

Tel: _____ **E-postadress:** _____

Läkemedelsintag senaste 10 dyggen:

Att urinprovet är lämnat enligt instruktion på baksidan, intygas av provtagare:

Namn (provtagare): _____

Signatur (provtagare): _____

Ifylls av provlämnaren:

Jag intygar att uppgifterna är korrekta, att urinen i min närvaro hållts i öppen förpackning och därefter förseglats.

Initialer: _____

Signum:(ej hela namnet) _____

Datum: _____

62 droger i en analys, se schemat nedan, och/eller ett eller flera av övriga alternativ nedan.

Markera med kryss. Varje kryss är en beställd analys.

DROGGRUPP	62 ANALYSERADE ÄMNEN:	CUT-OFF (ng/mL)
Amfetamin	<i>Amfetamin, Metamfetamin, MDMA, MDA</i>	50
Bensodiazepiner	<i>Diazepam, Nordiazepam, Oxazepam, Temazepam, Fenazepam, 3-OH-Fenazepam, 7-Aminoklonazepam, 7-Aminoflunitrazepam, Alprazolam, α-OH-Alprazolam, Flurazepam, 1-OH-Etyl-Flurazepam, Desalkylflurazepam, Midazolam, α-OH-Midazolam, Bromazepam, 3-OH-Bromazepam, Lorazepam</i>	50
Kokain	<i>Bensoylecgonin</i>	25
Cannabinoider	<i>THC-karboxylsyra med kvot</i>	10
Opiater	<i>Morfin, 6-Acetylmorfin, Kodein, Norkodein, 6-Acetylkodein, Dihydrokodein</i>	5-50
Opioider	<i>Tramadol, O-Desmetyltramadol, Fentanyl, Norfentanyl, Oxykodon, Noroxykodon, Tilidin, Nortilidin, Naloxon, Hydromorfon, Dextrometorfan, Loperamid, Dextrorfan, N-Desmetylloperamid, Mitragynin</i>	5-50
Övriga	<i>Ketamin, Zolpidem (Stilnoct), Zolpidem-Fenyl-4-Karboxylsyra, Zaleplon (Sonata), 5-Oxo-Zaleplon, Zopiclon (Imovane), Norzopiklon, Pregabalin (Lyrica), Metylfenidat (Concerta), Ritalinsyra, Gabapentin, 2-Amino-5-Kloropyridin, Dehydronorketamin</i>	5-50
Buprenorfin	<i>Buprenorfin, Norbuprenorfin</i>	2
Metadon	<i>Metadon, EDDP</i>	50
Urinkontroller	<i>pH, kreatinin</i>	se svar


THC - Nedtrappning med kvot, även under cut-off 25ng/ml	
Stor Opiat/Opioid-analys, ca 60st, juridiskt hållbart	
Stor Bensodiazepin- analys, ca 60st, juridiskt hållbart	
Stor Amfetamin-analys, ca 80st, juridiskt hållbart	
Separation av D-/L-amfetamin (exv. vid medicinering av Elvansé)	
Spice, >200st <i>se www.prodiagnostics.se för mer info</i>	
KAT (Chatinones)	
GHB	
Anabola Steroider, 895.-	
>2000 droger - Intoxprov, kort spårtid av "okänd substans", juridiskt hållbart	
Verifikation av positivt snabbtest, ange drog:	
Valfri analys, ange:	

Kitet innehåller: 2 provrör med lock och 2 förlängningsrör, box med remiss (som du nu läser), streckkoder finns bara i provkit. Sedan river du av ett ark med 10 etiketter från egen rulle. Du behöver även en Urinmugg (ingår ej i kitet).

INSTRUKTION:

1. Fyll i remissen på omstående sida. Ange klientens Initialer, *ej namn eller personnummer*.
Var nogga att ange **E-postadress** och **Kundnummer!**
2. Se till att få urin i ren mugg. Följ gällande regler för att undvika manipulation.
 - a) Skruva av det gula locket, men spara det. Sätt på förlängningsröret.
 - b) Dra upp pistongens bas till linjen på röret, så du har ett nästan fullt rör med urin.
 - c) Vänd på röret och sug in sista urindropparna innan förlängningsröret tas av.
 - d) Bryt av hela det uppstickande handtaget och kasta det samt förlängningsröret.

Skruva på det lilla locket.
Upprepa med nästa rör.

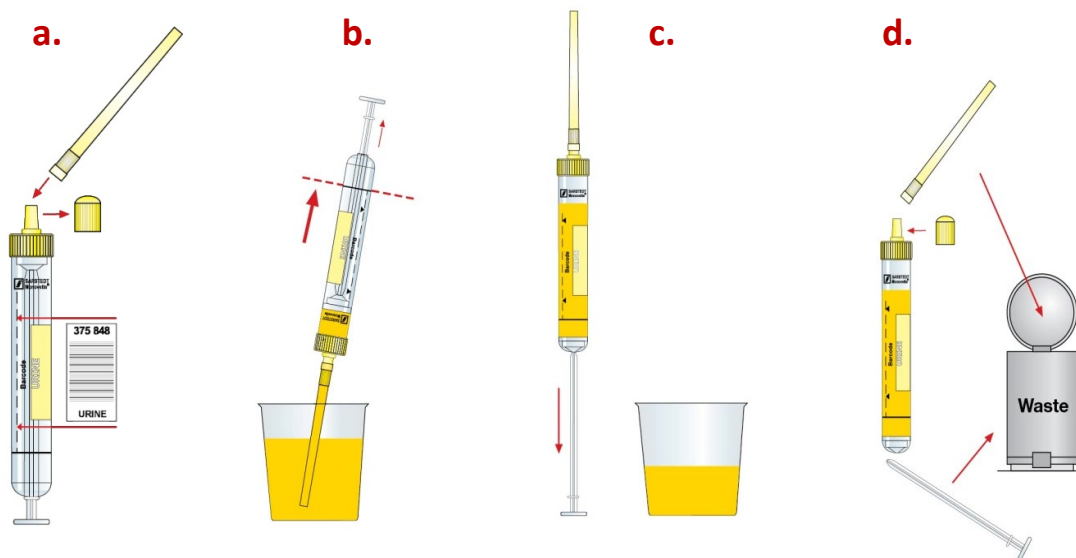

4. Sätt på streckkodsetiketter:
 - a) En på varje provrör,
 - b) En på remissen, översta vänstra hörnet
 - c) Kopiera remissen för uppföljning. Ange klient-namn på den egna kopian!
 - d) Kasta de överblivna streckkoderna på arket när du är klar.
7. Lägg båda provrören i plastpåsen och förslut påsen med förseglingstejpen.
8. Lägg ned i kartongen: **a)** Den förslutna plastpåsen med provrören.
b) Remissen, glöm ej ange **e-postadress** och **kundnummer!**
9. Förslut kartongen och posta.