

Remiss för droganalyser i Kapillärt helblod - pappkort

Beställare: _____ Provdatum: _____

Adress: _____

Streck-kod

Kund Nr: _____ E-postadress: _____

Läkemedelsintag senaste 10 dyggen:

Att blodprovet är lämnat enligt instruktion på baksidan, intygas av provtagare:

Namn och signatur (provtagare): _____

Initialer provlämnare OBS, Ej namn eller personnummer! _____

Multi-analys Ca 60 substanser, Kapillärblod; 20 mikrolit EDTA helblod behövs.

DROGGRUPP	ANALYSER Kapillärblod/Serum	CUT-OFF, ng/mL
Amfetamin	Amfetamin, Metamfetamin, MDMA, MBDB, MDA, BDB, MDEA	1,0
Bensodiazepiner	Diazepam, Nordiazepam, Oxazepam, Temazepam, Klonazepam 7-Aminoklonazepam, Flunitrazepam, 7-Aminoflunitrazepam, Alprazolam, OH-Alprazolam, Flurazepam, Desalkylflurazepam, Midazolam, OH-Midazolam, Bromazepam, Lorazepam,	0,1 till 1,0
Kokain	Kokain, Bensoylecgonin, Lidokain	1,0
Cannabinoider	THC, THC-COOH-glukuronid, 11-OH-THC, THC-COOH	1,0
Opiater	Morfin, 6-Acetylmorfin, Morfin-3-glukuronid, Kodein, Kodeinglukuronid, Norkodein, Morfin-6-glukuronid, 6-Acetylkodein, Dihydrokodein	1,0
Opioider	Tramadol, Fentanyl, Oxykodon, Noroxykodon, Tilidin, Nortilidin, Naloxon, Hydromorfon, O-Desmetyltramadol	0,1 till 1,0
Katinoner	Mefedron, Metylon, Butylon, MDPV	1,0
Övriga	Ketamin, Zolpidem (Stilnoct), Zaleplon (Sonata), Zopiclon (Imovane), Pregabalin (Lyrica), Metylfenidat (Concerta), Gabapentin	0,1-2,0
Buprenorfin	Buprenorfin, Norbuprenorfin	0,1
Metadon	Metadon, EDDP	1,0/0,1

Etylglukuronid, lång spårtid (upp till 120 h) Cut-off 1,0 ng/mL




PEth

Innehåll i kitet:

Blå lancett 4st, Mini-pipett 4st

2st Kort för uppsugning av kapillärblod

2st Konvolut att lägga blodkortet i

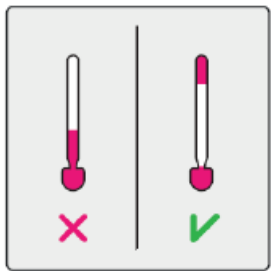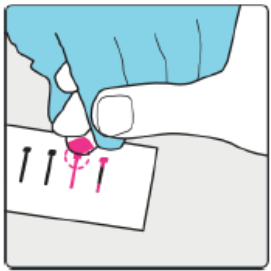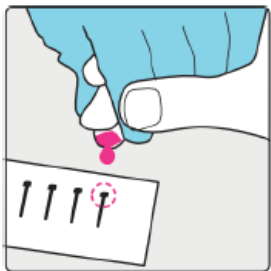

1. Stick hål med lancetten

2. Torka bort första droppen blod med en tork, eftersom den första droppen kan innehålla en okänd mängd vävnadsvätska.

3. Sänk gärna handen för att få ökat blodflöde. Vänd handen så att handen pekar nedåt och låt droppen hänga ner mot kortet. Det är viktigt att få fram en stor hängande droppe.

4. När en stor hängande droppe bildats, låt den kontakta ingången på kortet genom att sätta fingret försiktigt mot öppningen. Inte för hårt för då kan ingångskanalen blockeras. Håll fingret mot öppningen tills man ser att kanalen fyllts med blod.

5. Notera att kanalen tömts helt och därmed fungerat som den ska.

6. Fyll så många kanaler du behöver (antal analyser du vill beställa). Glöm inte att fylla en kanal till B-prov.

7. Stäng kortet, vik över fliken, fäst med en streckkod.

När blodprov är taget:

- Sätt på streckkodsetikett på två ställen: på blodkortet (se ovan nr 7) samt på remissen
- Ta en kopia av remissen för uppföljning och arkivering
- Lägg blodkortet i det medföljande konvolutet
- Lägg i kartongen:
 - a) Konvolutet med blodkortet
 - b) Remissen; glöm ej ange e-postadress!
- Förslut kartongen och posta. Vid frågor, ring 040-685 00 88